



Sicher erfasst

Cystoskopie

MASLANKA Mehrweg urologische Fremdkörperzangen

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer Zangen



Schrumpfschlauch erhöht die Knickschutzstabilität am proximalen Ende

Luer-Lock Anschluss zum Reinigen des Innenlumens

Kraftbegrenzung


Vom Griff bis hin zum abgestimmten Winkel – das gesamte Produkt ist ergonomisch und bietet daher eine komfortable Anwendung

Zur Unterstützung des Fingers


Starr = Rohr



Halbflexibel = Dünnwandiges Rohr

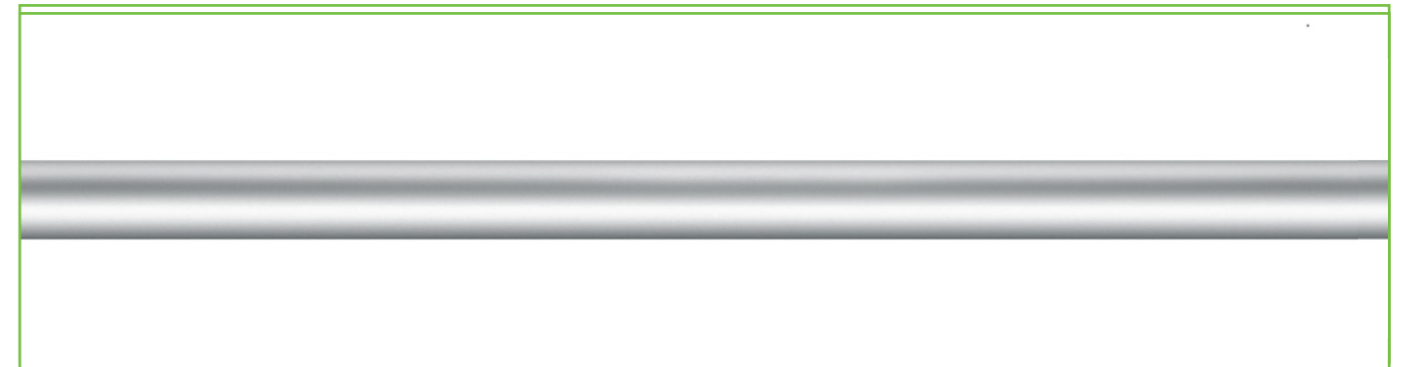

Flexible = Spirale und monofiler Zugdraht

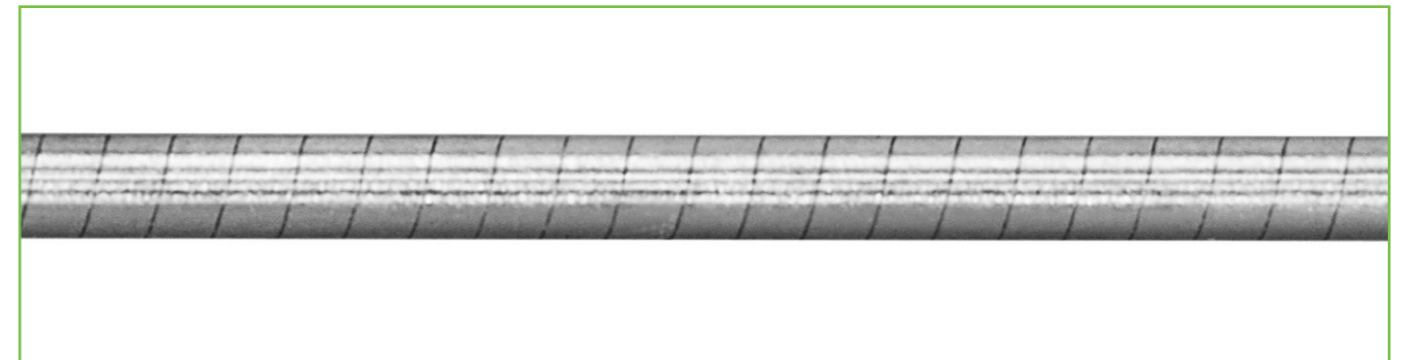



Mehrweg

Fremdkörperzange aufeinander gezahnt, 4,6 mm lang

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S04616-040	1,6 mm	- 8,4 mm	- 5,2 mm ³	- 4,6 mm	40 cm	1 Stück
S04616-060	1,6 mm	- 8,4 mm	- 5,2 mm ³	- 4,6 mm	60 cm	1 Stück

Starr: Rohr und Draht als Innenzug

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
RS04616-060	1,6 mm	- 8,4 mm	- 5,2 mm ³	- 4,6 mm	60 cm	1 Stück




Mehrweg

Fremdkörperzange ineinander gezahnt, 6,9 mm lang

Starr: Rohr und Draht als Innenzug

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
RS04316-040	1,6 mm	- 11,2 mm	- 3 mm ³	- 6,9 mm	40 cm	1 Stück
RS04316-060	1,6 mm	- 11,2 mm	- 3 mm ³	- 6,9 mm	60 cm	1 Stück

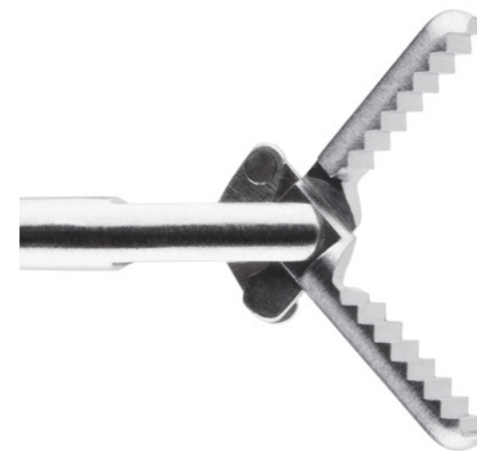

Mehrweg

Fremdkörperzange ineinander gezahnt

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S05212-040	1,2 mm	- 6 mm	- 3,8 mm ³	40 cm	1 Stück




Mehrweg

Fremdkörperfazzange ineinander gezahnt, einseitig

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S05316-060	1,6 mm	- 5,2 mm	- 5,3 mm ³	- 3,7 mm	60 cm	1 Stück

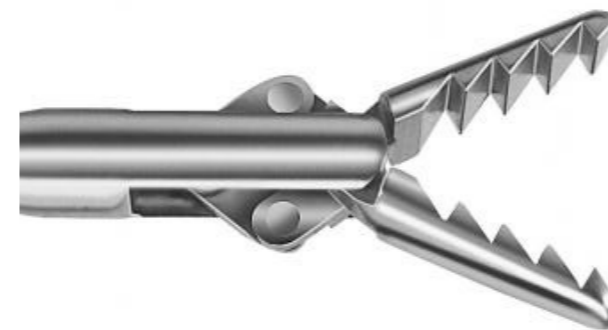

Mehrweg


Fremdkörperfazzange Hechtmaul

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S1816-040	1,6 mm	- 5,5 mm	- 3,7 mm	40 cm	1 Stück

Starr: Rohr und Draht als Innenzug

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
RS1816-060	1,6 mm	- 5,5 mm	- 3,7 mm	60 cm	1 Stück
RS1822-040	2,3 mm	- 8,5 mm	- 5,7 mm	40 cm	1 Stück

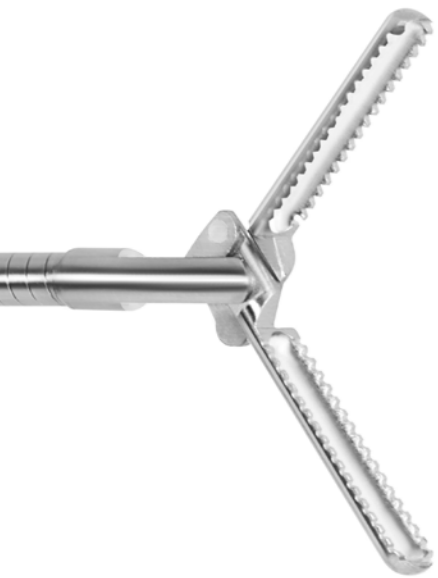

Fremdkörperzange für Steinstraße

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S04116-030	1,6 mm	- 13,8 mm	- 10,5 mm ³	- 8,2 mm	30 cm	1 Stück

Starr: Rohr und Draht als Innenzug

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
RS04116-060	1,6 mm	- 13,8 mm	- 10,5 mm ³	- 8,2 mm	60 cm	1 Stück



DJ Zange

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S08322-040	2,3 mm	- 8,0 mm	- 6,1 mm	40 cm	1 Stück
S08322-060	2,3 mm	- 8,0 mm	- 6,1 mm	60 cm	1 Stück

Starr: Rohr und Draht als Innenzug

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
RS08322-040	2,3 mm	- 8,0 mm	- 6,1 mm	40 cm	1 Stück
RS08322-060	2,3 mm	- 8,0 mm	- 6,1 mm	60 cm	1 Stück

Mehr Produkte von Maslanka




Mehrweg

Rattenzahn Fassung

Flexibel: Spirale über die ganze Länge geschliffen

Artikelnummer	Instrumentendurchmesser	Öffnungsbreite	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
S08416-040	1,6 mm	- 9,0 mm	- 4,2 mm	40 cm	1 Stück
S08416-060	1,6 mm	- 9,0 mm	- 4,2 mm	60 cm	1 Stück
S08422-040	2,3 mm	- 5,6 mm	- 4,2 mm	40 cm	1 Stück
S08422-060	2,3 mm	- 5,6 mm	- 4,2 mm	60 cm	1 Stück

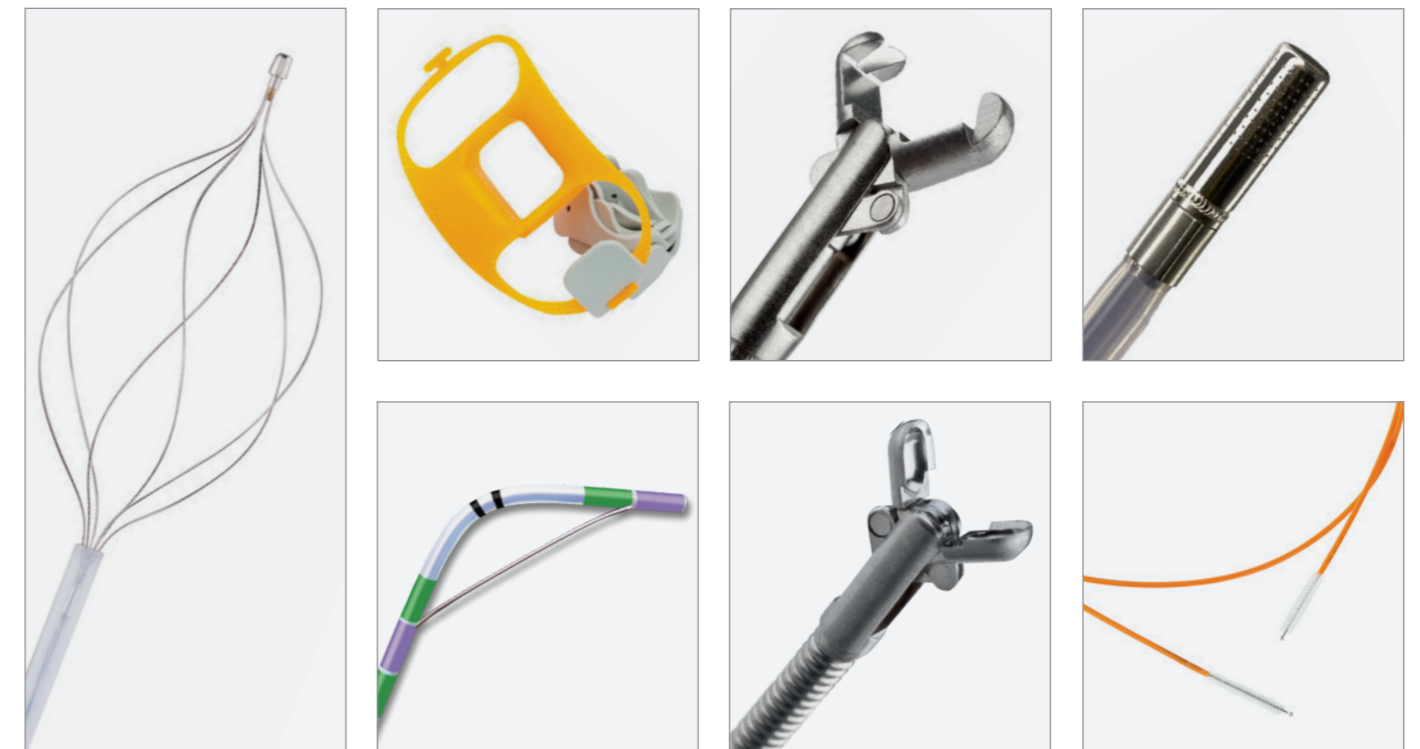

Produkte für die Bereiche Gastroenterologie, Kardiologie und Urologie sowie Speziallösungen für die Chirurgie gehören zu unserem Produktprogramm.

In unserem Produktkatalog finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Produkte. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gastroenterologie

Kardiologie

Urologie

Neurologie

Kundenspezifische Entwicklungen

Cystoskopie

Mehrweg urologische Fremdkörperzangen



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

03/2022 | DE

CE 0483